


# TURNIN®

L'embase pivotante qui permet le transfert du fauteuil roulant au siège conducteur



 **auto**  
**ADAPT**  
for your independence

DES INVENTIONS QUI FACILITENT LA VIE

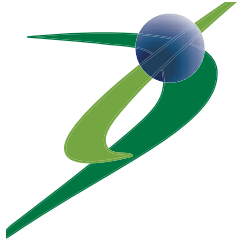


# TURNIN®

## L'embase pivotante qui fait tourner le siège vers l'intérieur

### Convient aux petits utilitaires et mini bus

Turnin est une embase pivotante qui fait tourner le siège vers l'intérieur du véhicule. Il a été conçu pour les petits utilitaires et mini bus et rend possible le transfert du fauteuil roulant au siège conducteur. La personne en fauteuil monte dans la voiture grâce à une rampe ou un hayon et maintient le fauteuil grâce à des fixations au sol.

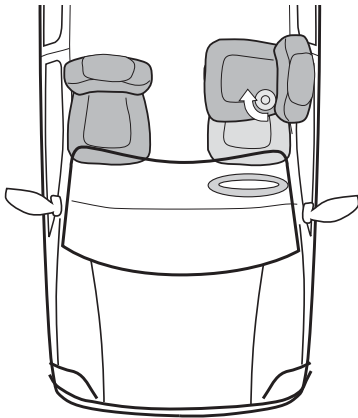

### Fonctionne avec une télécommande

Turnin est activé par une télécommande. Le pivotement est interrompu dès que l'on relâche le bouton de contrôle. Cela permet donc à l'utilisateur de placer ses jambes à son rythme. Une fois installé, l'emplacement du fauteuil se règle manuellement.

### Crash test

Turnin a passé le crash test et est conforme à toutes les réglementations en vigueur. Il porte le label CE.



1. Rentrez dans le véhicule grâce à une rampe ou un hayon.



2. Utilisez la télécommande pour tourner le fauteuil vers l'intérieur. Faites votre transfert.



3. Tournez le siège vers le poste de conduite. Vous êtes alors prêts à partir !

**auto**  
**ADAPT**  
for your independence

[www.autoadapt.fr](http://www.autoadapt.fr)

#### Autoadapt AB

Åkerivägen 7, S-443 61 Stenkullen, Suède

Tél : +46 (0)302 25400

E-mail : [contact@autoadapt.se](mailto:contact@autoadapt.se)

[www.autoadapt.fr](http://www.autoadapt.fr)