


# TURNIN®

Vridplattan som underlättar  
vid överflytt från  
rullstol



 **auto**  
**ADAPT**  
for your independence

UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ

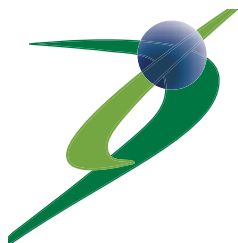


# TURNIN®

## Vridplattan som vrider stolen inåt i bilen

### Lämplig för MPV-bilar och minibussar

Turnin är en vridplatta som vrider stolen inåt i bilen. Den är avsedd för MPV-bilar och minibussar och underlättar vid överflytt mellan rullstol och bilstol. Den rullstolsburne kör in i bilen via ramp eller rullstolslyft och låser fast rullstolen i golvets rullstolslås eller annan typ av förankring.

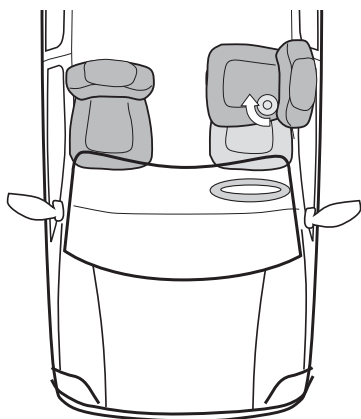

### Manövreras med handkontroll

Turnin manövreras elektriskt med en handkontroll. Vridrörelsen avbryts när handkontrollens knapp släpps, och gör att brukaren har möjlighet att i sin egen takt kunna förflytta benen. Stolens längdförskjutning manövreras manuellt.

### Krocktestad

Turnin är krocktestad och uppfyller de krav som ställs enligt gällande lagar och förordningar. Produkten är CE märkt.



1. Kör in i bilen via lyft eller ramp. Förankra rullstolen i bilgolvet.



2. Vrid in bilstolen med hjälp av handkontrollen. Flytta över från rullstolen.



3. Vrid fram bilstolen i position för körning. Redo för avfärd.

**auto  
ADAPT**  
for your independence

**Autoadapt AB**  
Åkerivägen 7  
S-443 61 Stenkullen  
Tel: 0302 254 00 Fax: 0302 254 04  
E-mail: [contact@autoadapt.se](mailto:contact@autoadapt.se)  
[www.autoadapt.se](http://www.autoadapt.se)

För mer information se  
[www.autoadapt.se](http://www.autoadapt.se)